

Innovación al alcance de la mano



Sistemas de Infusión

Más seguro. Más pequeño. Más intuitivo.

B. Braun Space...

Dos modelos de bomba con una misma filosofía

Más innovador, más seguro y más sencillo de manejar que cualquier otro sistema en el mercado, Infusomat® Space y Perfusor® Space están estableciendo nuevos estándares en la tecnología de infusión.

El interfaz de usuario para ambos tipos de bombas es idéntico. Esta uniformidad facilita la formación del personal sanitario y optimiza el flujo de trabajo, incrementando así los niveles de seguridad.

Infusomat® Space y Perfusor® Space ofrecen soluciones universales para un amplio abanico de tratamientos, al tiempo que optimizan la movilidad, flexibilidad y conectividad. Por primera vez, se facilita la estandarización de los sistemas de gestión de la infusión en contextos hospitalarios.

B. Braun Space le proporcionará

- Tecnología de última generación
- Sistemas de seguridad innovadores
- Máximas prestaciones en un espacio reducido
- Un sistema flexible, de fácil manejo e intuitivo

Infusomat® Space

Perfusor® Space



Innovación

...el nuevo referente en Sistemas de Infusión

Sistemas de Infusión

Recupere el terreno perdido

B. Braun Space crea un ambiente de trabajo que requiere mucho menor espacio que los sistemas actuales. Ello le permitirá disponer de mayor libertad y espacio para prestar una atención sanitaria de primera línea.

Infusomat® Space y Perfusor® Space pueden funcionar como sistemas individuales o ser integrados en B. Braun SpaceStation lo que les confiere una gran flexibilidad al poder ubicar hasta 4 bombas Space en cualquier configuración. Lo único que se necesita es un "clic" para integrarlas en el sistema, la retirada es igual de rápida y sencilla. Para tratamientos complejos, pueden combinarse cómodamente hasta 6 B. Braun SpaceStation en un solo sistema, pudiendo así conectar hasta 24 bombas. La corriente siempre se le suministra al sistema mediante un único cable.



- *Gane espacio con un sistema pequeño, ligero y versátil.*
- *Optimice su tiempo con bombas de fácil incorporación y retirada.*
- *Olvídense de los múltiples cables gracias a su fuente de alimentación central con un único cable.*
- *Todas las líneas de infusión quedan ordenadas desde el propio sistema.*



Espacio


Infusomat® Space y Perfusor® Space...

Prevenir es proteger

Adicionalmente a los sistemas de seguridad, como los sensores de gotas y aire, Infusomat® Space ha duplicado los sensores de presión para aportar una detección más precisa.

Así mismo el nuevo Infusomat® Space dobla la protección frente al flujo libre con la incorporación de dos pinzas, una dentro de la bomba y otra directamente sobre la línea del Infusomat® Space. Se impide, con ello, el flujo libre incluso cuando la pinza de rodillo no estuviera cerrada antes de retirar la vía.

La pinza antiflujo está especialmente diseñada para prevenir el flujo libre durante los cambios de línea.

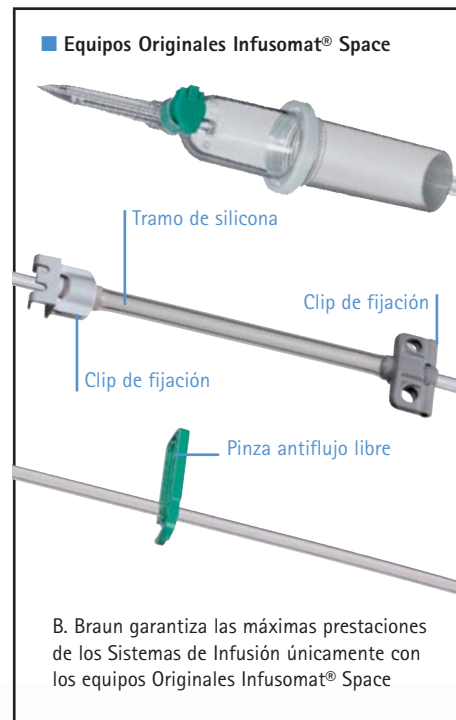

Seguridad

...seguridad y precisión

Sistemas de Infusión

El cambio de jeringas es ahora más seguro y cómodo que nunca

La innovadora tecnología de Perfusor® Space no sólo asegura un excelente comportamiento en la fase de arranque y una alta precisión en la administración del fármaco, sino que también ofrece una seguridad y comodidad únicas durante todo el tratamiento.

El doble sistema de fijación de la jeringa junto con el sistema de freno de émbolo impiden los errores de manipulación así como el flujo libre de la infusión durante el proceso de cambio de jeringa.

Perfusor® Space incorpora nuevos mecanismos de protección, como el freno de émbolo, que evita administraciones de fármacos no deseadas durante y después del cambio de jeringa.

- Jeringas Originales Perfusor®
Tamaños: 20 ml y 50 ml
- Líneas Originales Perfusor®

Émbolo sin látex, con excelentes características de deslizamiento

Junta de estanqueidad de doble sellado

Nueva escala de graduación doble

B. Braun garantiza las máximas prestaciones de los Sistemas de Infusión únicamente con las jeringas y líneas Originales Perfusor®



Seguridad

Un manejo intuitivo...

Confíe en su instinto

Trabajar con B. Braun Space es tan sencillo que en seguida notará su comodidad. Los mensajes de pantalla le guiarán permitiéndole hacer funcionar la bomba de una forma segura e intuitiva. Los menús de opciones están siempre accesibles para que pueda consultar los datos relativos a la terapia de infusión.

B. Braun Space se convierte así en el sistema más versátil actualmente disponible, cubriendo de este modo todo el ámbito de la cadena asistencial.

Esta uniformidad le permitirá reducir los tiempos de formación del personal sanitario e incrementará los niveles de seguridad.



Las reducidas dimensiones y su menor peso permitirán que B. Braun Space le acompañe en sus traslados a lo largo de toda la cadena asistencial.



Intuitivo

...con total conectividad

Sistemas de Infusión

Comunicación de datos de última generación

El módulo B. Braun SpaceCom puede integrarse opcionalmente con B. Braun SpaceStation y facilitar las posibilidades de la moderna tecnología de la información.

Dispone de los interfaces necesarios para vincular los sistemas B. BraunSpace a sistemas PDMS (Patient Data Management System) de la red hospitalaria.

A través de su navegador de Internet, B. Braun SpaceOnline le permitirá visualizar la terapia de infusión ayudándole en su tarea de monitorización del paciente. Esto hace de B. Braun SpaceCom una plataforma insuperable para la gestión central de los datos.

Ahorre tiempo y energía: B. Braun SpaceCom en combinación con B. Braun SpaceOnline le permitirá la monitorización centralizada de todas las bombas conectadas al sistema.



Comunicación

B. Braun Space

Sistemas de Infusión

Cómo puede ayudarle

- Aportando sistemas de seguridad y alarma que garantizan una calidad asistencial de primera línea.
- Simplificando los flujos de trabajo con un sistema pequeño, manejable y ligero.
- Adaptando su configuración a las distintas necesidades.
- Proporcionando un manejo intuitivo que facilita el proceso de aprendizaje.
- Optimizando sus condiciones de trabajo al reducir espacio y cables.
- Mejorando la movilidad del paciente a lo largo de la cadena asistencial.
- Contemplando todas las posibilidades de comunicación y centralización de datos.
- Reduciendo su labor de documentación.



Diemer s.l.
C/ Enkarterri nº 1 Bis Loca 1
48840 Güeñes - Vizcaya
Tlfno. 946690037
Fax. 946690357
Email. diemer@diemersl.com
Web: www.diemersl.com
www.diemer.es

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE